

Preparación del cartucho Xpert[®] MTB/RIF - Sedimento de esputo

Consulte el prospecto para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad, visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid

Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina en Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF y un vial de reactivo de muestra para cada muestra. Quite el envoltorio de aluminio.



2 Transfiera 0,5 ml de sedimento resuspendido a un tubo con tapa roscada, de base cónica. Añada 1,5 ml de reactivo de muestra.



3 Cierre el recipiente herméticamente y agítelo enérgicamente 10 a 20 veces o colóquelo en el mezclador vórtex 10 segundos. Incúbelo a temperatura ambiente durante un total de 15 minutos. Entre 5 y 10 minutos de iniciarse el período de incubación, agítelo enérgicamente de nuevo 10 a 20 veces o colóquelo otra vez en el mezclador vórtex como mínimo durante 10 segundos.

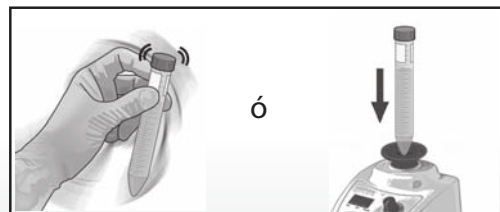

Nota: Un movimiento hacia atrás y hacia delante equivale a una sacudida.

4 Ponga una etiqueta en el lado izquierdo o derecho del cartucho. Quite la tapa del cartucho Xpert.



5 aspire la muestra licuada hasta la línea de 2 ml de la pipeta o justo por encima de ella.



6 Vacíe la pipeta en la cámara de la muestra.



7 Coloque la tapa en el cartucho Xpert.



8 Inicie la prueba dentro de los límites de tiempo especificados en el prospecto.