

Preparação do cartucho Xpert® Carba-R utilizando amostra colhida por zaragatoa retal ou perirretal

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com





Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



- 1 Adquira um cartucho Xpert e um frasco de reagente de amostra para cada amostra.
- 2 Insira a zaragatoa no frasco de reagente de amostra.
- 3 Parta a zaragatoa pela marca de entalhe junto à abertura do frasco.
- 4 Coloque novamente a tampa no frasco de reagente de amostra e agite no agitador de vórtice durante 10 segundos.
- 5 Abra a tampa do cartucho Xpert.
- 6 Aspire o reagente de amostra até à linha da pipeta fornecida.
- 7 Esvazie a pipeta para dentro da câmara de amostra.
- 8 Feche a tampa do cartucho Xpert.
- 9 Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.

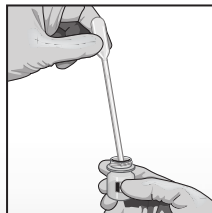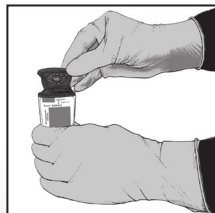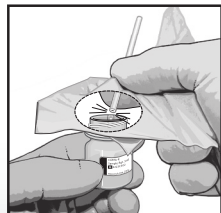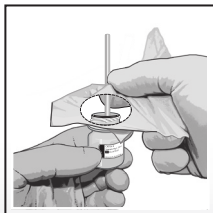

*Nota: Não segure na zaragatoa por baixo do entalhe.
Utilize gaze ou equivalente para minimizar o risco de contaminação.*