

# Preparación del cartucho Xpert® HIV-1 VL XC con una pipeta suministrada por Cepheid

- Xpert® HIV-1 VL XC

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid  
Oficina de EE. UU.  
(888) 838-3222, opción 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Oficina de Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**NOTA:** Espere a que la muestra y los cartuchos de la prueba HIV-1 VL XC se equilibren a una temperatura de 15-30 °C antes de pipetear el plasma en el cartucho. No pipetee plasma en un cartucho que esté frío (a menos de 15 °C).


1 Tome un cartucho Xpert y un tubo de plasma.



2 Abra la tapa del cartucho.

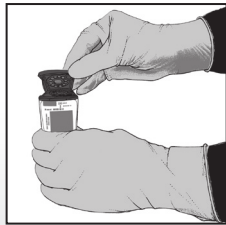


3 Llene la pipeta hasta justo debajo del bulbo para transferir al menos 1 ml de plasma del tubo. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire grandes en la punta de la pipeta mientras se llena la pipeta.

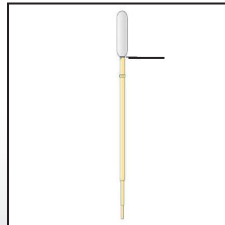

4 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de muestras del cartucho.



5 Cierre la tapa del cartucho.

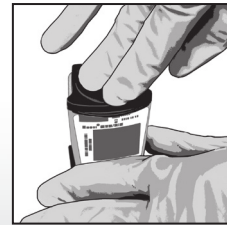

6 Inicie la prueba dentro del período especificado en el prospecto.

# Preparación del cartucho Xpert<sup>®</sup> HIV-1 VL XC con una pipeta de precisión

Consulte el prospecto para obtener instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid  
Oficina de EE. UU.  
(888) 838-3222, opción 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Oficina de Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**NOTA:** Espere a que la muestra y los cartuchos de la prueba HIV-1 VL XC se equilibren a una temperatura de 15-30 °C antes de pipetear el plasma en el cartucho.

No pipetee plasma en un cartucho que esté frío (a menos de 15 °C).


1 Tome un cartucho Xpert y un tubo de plasma.



2 Abra la tapa del cartucho.

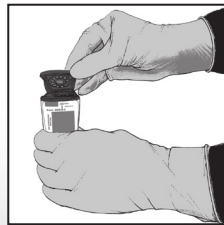

3 Humedezca previamente la punta de la pipeta una vez, para lo que deberá llenar la punta de la pipeta con plasma y vaciarla en el tubo. A continuación, llene la pipeta con 1 ml de plasma del tubo.

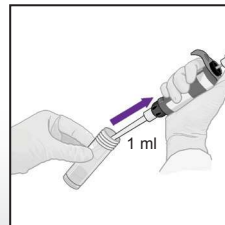

4 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de muestras del cartucho.



5 Cierre la tapa del cartucho.



6 Inicie la prueba dentro del período especificado en el prospecto.