

Xpert[®] Preparación del cartucho HIV-1 VL

- Xpert[®] HVI-1 Viral Load

Consulte el prospecto para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para obtener un ejemplar de la hoja de datos de seguridad, visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina en Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Antes de empezar esta prueba:


1. Centrifuge la muestra para separar el plasma y los eritrocitos según las instrucciones del fabricante.
2. Equilibre la muestra a la temperatura ambiente (20 °C a 35 °C).
3. Agite el plasma en un tubo vórtex durante 15 segundos. Si la muestra está turbia, aclare con un giro rápido.




- 1 Tome un cartucho Xpert para cada muestra.



- 2 Abra la tapa del cartucho.

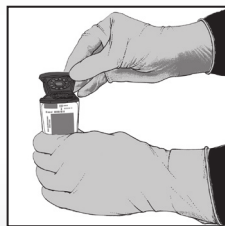


- 3 aspire el plasma hasta justo por encima de la marca de 1 ml en la pipeta.

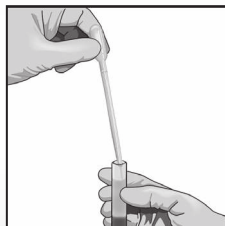

- 4 Vacíe el contenido en la cámara de la muestra.



- 5 Cierre la tapa del cartucho.

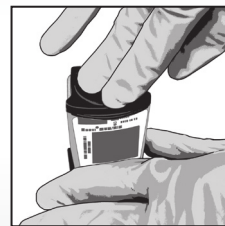

- 6 Inicie la prueba dentro de los límites de tiempo especificados en el prospecto.