

Preparação do cartucho Xpert® *a mostrar amostra de urina ou em zaragatoa no tubo de reagente para transporte.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV


Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com
Filial na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



- 1 Obtenha um tubo de reagente para transporte com amostra devidamente colhida e rotulada.

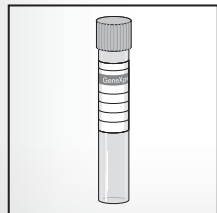


- 2 Obtenha um cartucho Xpert e uma pipeta de transferência (fornecida no kit do ensaio).




- 3 Abra a tampa do cartucho Xpert.



- 4 Inverta suavemente o tubo para transporte 3 a 4 vezes para misturar.

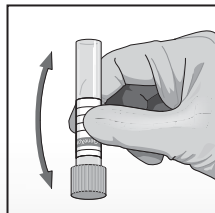

- 5 Encha a pipeta de transferência até ultrapassar a marca na haste da pipeta.

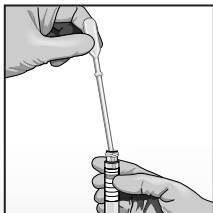


- 6 Esvazie o conteúdo da pipeta para a câmara de amostras.



- 7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



- 8 Introduza o cartucho e inicie o teste.

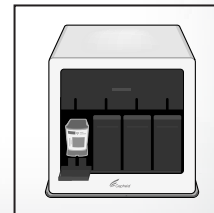

Preparação do cartucho Xpert® *a mostrar amostra de urina no recipiente principal de amostras.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV


Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com


Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com
Filial na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Colha uma amostra da urina inicial do jato de urina para o recipiente de colheita principal. Certifique-se de que a urina é bem misturada no recipiente de urina antes de transferir uma alíquota para o tubo de reagente para transporte de urina Xpert.

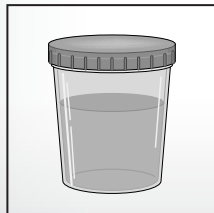

- 2 Obtenha um kit de colheita de amostra de urina Xpert.

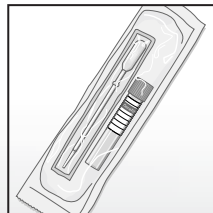

- 3 Abra a embalagem da pipeta de transferência descartável fornecida no kit de colheita de amostra de urina Xpert.
NOTA: NÃO utilize a pipeta do kit do ensaio.

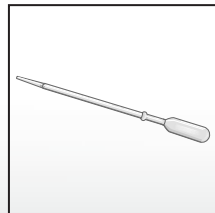


- 4 Introduza a pipeta de transferência no fundo do recipiente de urina.



- 5 Transfira aproximadamente 7 ml de urina de maneira a que o volume atinja a linha tracejada preta no rótulo do tubo.



- 6 Volte a tapar o tubo de reagente para transporte de urina e aperte bem a tampa. Rotule-o devidamente e transfira-o para a área de preparação do cartucho do ensaio GeneXpert.

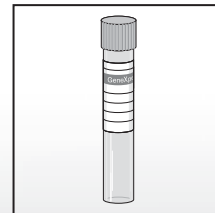

- 7 Consulte o verso deste cartão para obter mais instruções.