

Vorbereitung der Xpert® HBV VL Kartusche

- Xpert® HBV Viral Load

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com

Technischer Kundendienst von Cepheid

US-Niederlassung
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Vor Beginn dieses Tests:


1. Die Probe nach Anweisung des Herstellers zentrifugieren, um das Plasma/Serum und die Erythrozyten voneinander zu trennen.
2. Das Plasma/Serum auf Raumtemperatur (20-35 °C) kommen lassen.
3. Vor Gebrauch 10 Sekunden lang im Vortex mischen. Getrübbte Patientenproben durch kurzes Zentrifugieren klären.




- 1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche verwenden.



- 2 Den Kartuschendeckel öffnen.

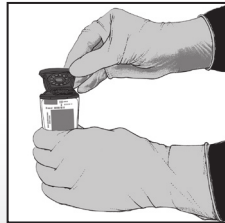


- 3 Das Plasma/Serum bis knapp über die 1-ml-Markierung auf der Transferpipette aspirieren bzw. mit einer Präzisionspipette nur 0,6 ml Plasma/Serum aspirieren.

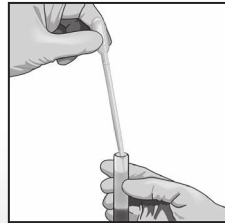

- 4 Den Inhalt in die Probenkammer entleeren.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.

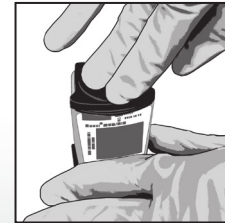

- 6 Der Test muss innerhalb von 4 Stunden nach Zugabe der Probe in die Kartusche begonnen werden.