

# Xpert® Preparação do cartucho HPV

Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Para obter uma cópia da FDS, visite o site [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA

(888) 838-3222

[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Filial na Europa

+33 563 82 53 19

[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Obtenha uma amostra cervical devidamente colhida e rotulada.

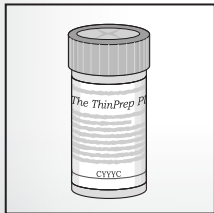

2 Obtenha um cartucho Xpert HPV e uma pipeta de transferência (fornecida).



3 Abra a tampa do cartucho Xpert.



4 Inverta suavemente o frasco de amostra 8 a 10 vezes ou agite-o no vórtex, a meia velocidade, durante 5 segundos.



5 Encha a pipeta de transferência com amostra até à linha (1 ml).



6 Esvazie o conteúdo da pipeta na câmara da amostra.



7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



8 Introduza o cartucho e inicie o ensaio.

