

# Preparación del cartucho Xpert® Factor II & Factor V

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid  
Oficina de EE. UU.  
(888) 838-3222, opción 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Oficina de Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




- 1 Obtenga el tubo de recogida de muestras con EDTA o citrato de sodio.



- 2 Obtenga un cartucho Xpert Factor II & Factor V.




- 3 Mezcle suavemente la muestra hasta que esté homogénea, invirtiendo el tubo 5 veces.

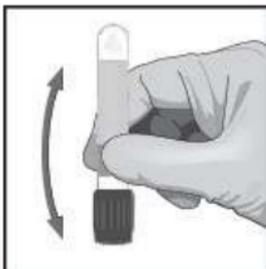

- 4 Abra la tapa del cartucho Xpert.



- 5 Empleando una pipeta volumétrica con una punta resistente a los aerosoles, aspire 50 µl de la muestra.

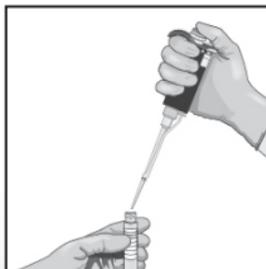

- 6 Transfiera la muestra a la pared inferior de la cámara «S» del cartucho.



- 7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



- 8 Cargue el cartucho e inicie el ensayo.