

Preparación del cartucho del Xpert® MRSA/SA Blood Culture

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com.

Servicio técnico de Cepheid
Oficina de EE. UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Obtenga un cartucho y un frasco de reactivo de elución.




2 Tras mezclar suavemente la muestra a mano, utilice la pipeta de transferencia de 50 µL suministrada para transferir la muestra al frasco de reactivo de elución. Es posible que quede algún residuo en la pipeta.



3 Cierre la tapa del reactivo de elución y agite este en un mezclador vórtex a alta velocidad durante 10 segundos.



4 Abra la tapa del cartucho.

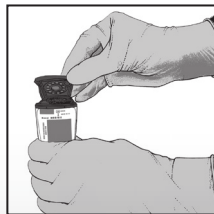

5 Con una pipeta de transferencia (no suministrada) limpia, transfiera todo el contenido del frasco de reactivo de elución a la cámara de muestras del cartucho.



6 Cierre la tapa del cartucho.



7 Inserte el cartucho e inicie el ensayo dentro del plazo especificado en el prospecto.

