

# Preparación del cartucho Xpert<sup>®</sup> HCV VL

- Xpert<sup>®</sup> HCV Viral Load

Consulte el prospecto para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para obtener un ejemplar de la hoja de datos de seguridad, visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid

Oficina en EE. UU.  
(888) 838-3222, opción 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Oficina en Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

## Antes de iniciar esta prueba:


1. Centrifugue la muestra para separar el plasma o el suero y los eritrocitos siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Deje que el plasma o el suero se estabilicen a la temperatura ambiente (20-35 °C).
3. Agite en un mezclador vórtex durante 15 segundos antes de su uso. Si la muestra está turbia, clarifíquela mediante una centrifugación rápida.




- 1 Tome un cartucho Xpert para cada muestra.



- 2 Abra la tapa del cartucho.

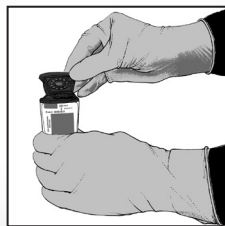

- 3 aspire el plasma o el suero hasta justo por encima de la marca de 1 ml de la pipeta.

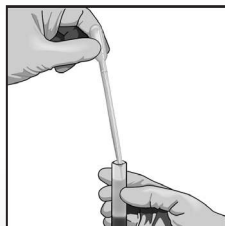

- 4 Vacíe el contenido en la cámara de muestras.



- 5 Cierre la tapa del cartucho.



- 6 Inicie la prueba dentro de los límites de tiempo especificados en el prospecto.