

Vorbereitung der Xpert[®] HCV VL Kartusche

- Xpert[®] HCV Viral Load

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatt ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar

Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Büro Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Vor Beginn dieses Tests:

1. Die Probe nach Herstelleranleitung zentrifugieren, um das Plasma/Serum und die roten Blutzellen voneinander zu trennen.
2. Das Plasma/Serum bei Raumtemperatur (20-35 °C) äquilibrieren.
3. Vor Gebrauch 15 Sekunden lang auf dem Vortex mischen. Getrübe Patientenproben durch kurzes Zentrifugieren klären.




- 1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche nehmen.



- 2 Den Kartuschendeckel öffnen.



- 3 Das Plasma/Serum bis knapp oberhalb der 1-ml-Markierung an der Pipette aspirieren.

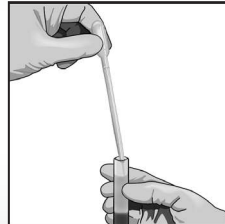

- 4 Den Inhalt in die Probenkammer entleeren.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.



- 6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens starten.