

# Preparazione della cartuccia Xpert® MRSA/SA Blood Culture

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda di sicurezza (SDS), visitare il sito [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com).

Assistenza Tecnica di Cepheid  
Ufficio USA  
(888) 838-3222, Opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Ufficio europeo  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Procurarsi una cartuccia e un flaconcino di reagente di eluizione.




2 Dopo aver miscelato delicatamente a mano il campione, utilizzare la pipetta di trasferimento da 50 µl in dotazione per dispensare il campione nel flaconcino di reagente di eluizione. È possibile che nella pipetta rimangano alcuni residui.



3 Chiudere il tappo del reagente di eluizione e miscelare su vortex ad alta velocità per 10 secondi.



4 Aprire il coperchio della cartuccia.

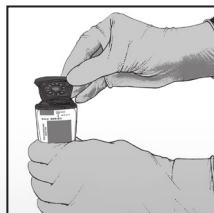

5 Con una pipetta di trasferimento (non in dotazione), trasferire l'intero contenuto del flaconcino di reagente di eluizione alla camera della cartuccia riservata al campione.



6 Chiudere il coperchio della cartuccia.



7 Inserire la cartuccia e iniziare il saggio entro l'intervallo di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

