

# Preparação do cartucho Xpert® Ebola *ilustração de amostra de zaragatoa bucal*


Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Poderá obter um exemplar da FDS em [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)


Assistência Técnica da Cepheid  
Filial nos EUA  
(888) 838-3222, opção 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Delegação na Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

Esfregue a ponta da zaragatoa\* no interior da bochecha com movimentos firmes e circulares. Se possível, utilize ambas as bochechas e a ponta completa da zaragatoa.

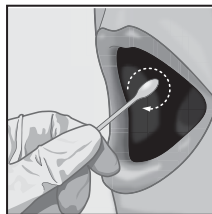


Alinhe a pequena ranhura da zaragatoa com o rebordo do frasco de reagente de amostra e parta a zaragatoa dobrando-a para um dos lados. Utilize gaze para evitar salpicos acidentais.

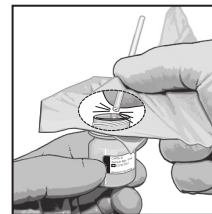

1 Obtenha um cartucho de Xpert Ebola e a amostra devidamente colhida e rotulada.



2 Com a tampa do frasco de reagente de amostra fechada, agite a amostra em vórtice durante 10 segundos.

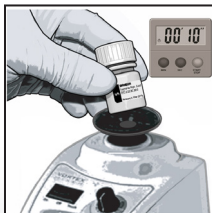


3 Incube à temperatura ambiente durante 20 minutos.



4 Abra a tampa do cartucho.



5 Com a pipeta fornecida, aspire 1 ml de amostra tratada com reagente de amostra.

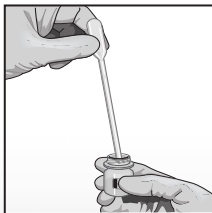

6 Esvazie o conteúdo da pipeta na câmara da amostra.



7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



8 Inicie o teste no prazo de 30 minutos.

# Preparação do cartucho Xpert® Ebola *ilustração de amostra de punção digital*


Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Poderá obter um exemplar da FDS em [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)


Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA  
(888) 838-3222, opção 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Delegação na Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

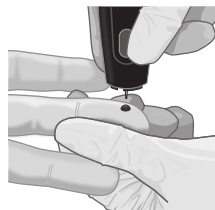

Deixe que pelo menos 2/3 da ponta da zaragatoa\* absorva o sangue. Transfira imediatamente a zaragatoa para o frasco de reagente de amostra.

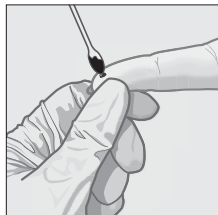

Alinhe a pequena ranhura da zaragatoa com o rebordo do frasco de reagente de amostra e parta a zaragatoa dobrando-a para um dos lados. Utilize gaze para evitar salpicos acidentais.

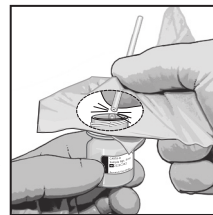

  
**Cepheid®**  
A better way.

- 1 Obtenha um cartucho de Xpert Ebola e a amostra devidamente colhida e rotulada.
- 2 Com a tampa do frasco de reagente de amostra fechada, agite a amostra em vórtice durante 10 segundos.
- 3 Incube à temperatura ambiente durante 20 minutos.
- 4 Abra a tampa do cartucho.
- 5 Com a pipeta fornecida, aspire 1 ml de amostra tratada com reagente de amostra.
- 6 Esvazie o conteúdo da pipeta na câmara da amostra.
- 7 Feche a tampa do cartucho Xpert.
- 8 Inicie o teste no prazo de 30 minutos.

