

Preparazione della cartuccia Xpert® Xpress GBS

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Supporto tecnico di Cepheid
Ufficio USA
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Procurarsi una cartuccia.



2 Aprire il coperchio della cartuccia.



3 Rimuovere un tampone dal tappo e sfregare leggermente i due tamponi tra loro con un movimento rotatorio per cinque secondi. Riporre il secondo tampone, ancora attaccato al tappo, nella provetta di trasporto.

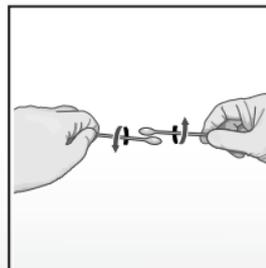

Nota: non tenere il tampone al di sotto della tacca.

4 Inserire il tampone rimosso dal tappo nella camera per il campione della cartuccia. Spezzare il tampone in corrispondenza della tacca.



Nota: utilizzare una garza o un materiale simile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

5 Accertarsi che il tampone possa oscillare liberamente all'interno della camera.



Posizionamento errato del tampone. L'estremità del tampone è rimasta incastrata nella scanalatura dell'apertura della camera per il campione.



6 Chiudere il coperchio della cartuccia. Avviare il test entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.



Procedura di ripetizione del test Xpert

• Xpert® Xpress GBS

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Supporto tecnico di Cepheid
Ufficio USA
(888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Gettare la cartuccia usata. Prendere una nuova cartuccia Xpert® Xpress GBS. Rimuovere dal tappo il tampone rimasto nella provetta di trasporto.



2 Inserire il tampone nella camera per il campione di una nuova cartuccia. Sollevare il tampone in modo che la tacca sia centrata nella scanalatura. Rompere il tampone spezzandolo sulla destra.



3 Assicurarsi che il tampone sia posizionato correttamente nella cartuccia, che l'estremità del tampone non si trovi nella scanalatura dell'apertura della camera per il campione e che non impedisca la chiusura del coperchio.



4 Se il tampone è incastrato nella scanalatura, utilizzare un panno/una garza senza lanugine o l'estremità avanzata dallo spezzamento del tampone per toglierlo dalla scanalatura, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.



5 Chiudere il coperchio della cartuccia. Avviare il test entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

