

Préparation de la cartouche Xpert® Bladder Cancer montrant l'échantillon d'urine

Se reporter à la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.


Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe +33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Obtenir un échantillon d'urine prélevé et étiqueté de manière appropriée.

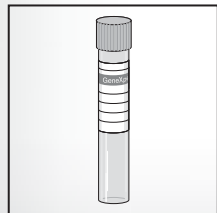


2 Se procurer une cartouche Xpert Bladder Cancer et une pipette de transfert (fournie).




3 Ouvrir le couvercle de la cartouche Xpert.



4 Retourner délicatement le tube de transport 3 fois pour mélanger.

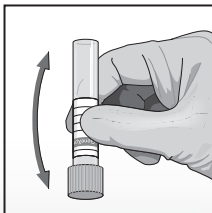

5 Remplir la pipette de transfert avec l'échantillon jusqu'au repère 4 ml.

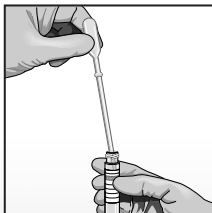


6 Vider le contenu de la pipette dans la chambre de l'échantillon.



7 Fermer le couvercle de la cartouche Xpert.



8 Insérer la cartouche et lancer le test.

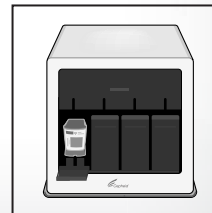

Préparation de la cartouche Xpert® Bladder Cancer montrant l'échantillon d'urine dans le flacon de prélèvement principal

Se reporter à la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



- 1 Obtenir un échantillon d'urine d'au moins 4,5 ml dans le flacon de prélèvement principal.
- 2 Se procurer un kit de réactif de transport d'urine Xpert.
- 3 Retourner 3 fois le flacon pour mélanger l'urine.
- 4 Utiliser la pipette de transfert jetable fournie dans le sachet contenant le tube. REMARQUE : Ne pas utiliser la pipette du kit du test.
- 5 Introduire la pipette de transfert jusqu'au fond du flacon de prélèvement d'urine.
- 6 Transférer environ 4,5 ml d'urine, de sorte que le volume atteigne la ligne noire sur l'étiquette du tube.
- 7 Remettre en place le bouchon du tube de réactif de transport d'urine Xpert et bien le serrer. Étiqueter de façon appropriée et transférer à la zone de préparation de la cartouche GeneXpert.
- 8 Consulter le dos de cette carte pour plus d'informations.

