

Preparação do cartucho Xpert® MRSA NxG Utilização de zaragatoa dupla

Dispositivo de colheita de amostras da Cepheid (referência 900-0370, zaragatoa dupla em meio de Stuart líquido)

ou

os sistemas de zaragatoa dupla e transporte da Copan (referência 139C LQ STUART)

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.



Poderá obter um exemplar da FDS em www.cephid.com ou www.cephidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Delegação nos EUA
(888) 838-3222, Opção 2
techsupport@cephid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cephideurope.com



- 1 Obtenha um cartucho Xpert e um frasco de reagente de eluição para cada amostra.
- 2 Insira uma zaragatoa simples no frasco de reagente de eluição.
- 3 Parta a zaragatoa pela marca de entalhe junto à abertura do frasco.
- 4 Volte a pôr a tampa do frasco do reagente de eluição e agite no agitador de vórtice a alta velocidade durante 10 segundos.
- 5 Abra a tampa do cartucho Xpert.
- 6 Utilizando uma pipeta de transferência (não fornecida), transfira todo o conteúdo do frasco para a câmara de amostra do cartucho.
- 7 Esvazie a pipeta para dentro da câmara de amostras.
- 8 Feche a tampa do cartucho Xpert.
- 9 Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.

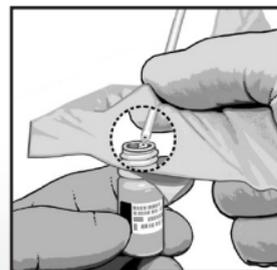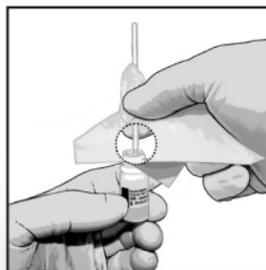

Nota: não segure na zaragatoa abaixo da marca de entalhe. Utilize gaze ou equivalente para minimizar o risco de contaminação.

Preparação do cartucho Xpert® MRSA NxG Utilização de uma ESwab

Sistema de coleta e transporte ESwab em meio de Amies líquido (Copan 480CE ou kit de coleta BD ESwab, referência 220245)

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cephheid.com ou www.cephheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Delegação nos EUA
(888) 838-3222, Opção 2
techsupport@cephheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cephheid.com




1 Obtenha um cartucho Xpert e um frasco de reagente de eluição para cada amostra.



2 Agite a amostra de zaragatoa a alta velocidade durante 5 segundos.



3 Utilizando uma pipeta de transferência (não fornecida), transfira 300 µl da amostra líquida para o frasco do reagente de eluição.

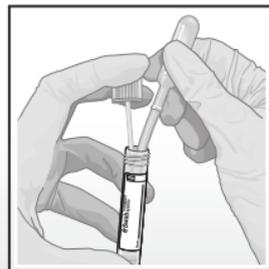

4 Volte a pôr a tampa do frasco do reagente de eluição e agite no agitador de vórtice a alta velocidade durante 10 segundos.



5 Abra a tampa do cartucho Xpert.



6 Utilizando uma pipeta de transferência (não fornecida), transfira todo o conteúdo do frasco para a câmara de amostra do cartucho.



7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



8 Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.

