

Präparation der Xpert® MTB/RIF Ultra Kartusche - Unbearbeitetes Sputum

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com

Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Jeweils eine Xpert Kartusche, Probenreagenz (PR) und Sputumentnahmebehälter pro Probe beschaffen.




Hinweis: Das Mindest-Sputumvolumen für einen (1) Test beträgt 1 ml.

- 2 Das Sputumvolumen abschätzen. 2 Teile PR zu 1 Teil Sputum geben. Behälterdeckel wieder aufsetzen.

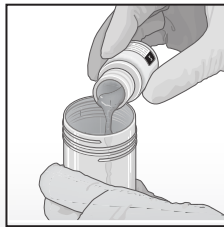


- 3
- 10 bis 20 Mal kräftig schütteln* oder mindestens 10 Sekunden auf dem Vortex-Mixer mischen.
 - 10 Minuten lang bei Zimmertemperatur inkubieren.
 - Erneut 10 bis 20 Mal kräftig schütteln.
 - Weitere 5 Minuten lang inkubieren.
- **Siehe nachstehenden Hinweis.

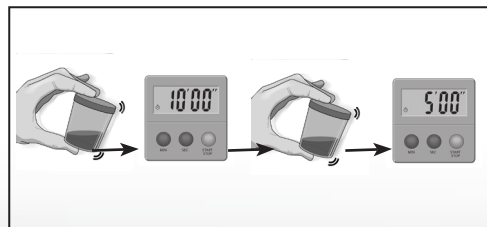


*Hinweis: *Unter 1 Mal schütteln ist 1 Hin- und Herbewegung zu verstehen.*

*Hinweis: **Schütteln und weitere 5 Minuten inkubieren, wenn sich die Probe nicht vollständig verflüssigt hat.*

- 4 Zum Beschriften oder Befestigen eines ID-Etiketts die Seite der Kartusche verwenden. Die Kartusche öffnen.

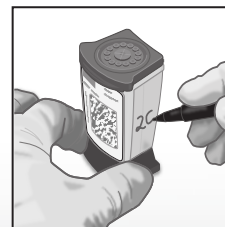

- 5 Die verflüssigte Probe bis etwas über die Markierung in die Pipette aufziehen.

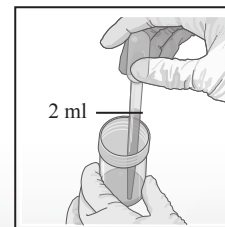

- 6 Die Probe langsam in die Probenkammer der Kartusche entleeren.



- 7 Den Deckel fest schließen. Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.

