

Preparación del cartucho Xpert® Carba-R utilizando una muestra de hisopo rectal o perirrectal

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE. UU.
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com


Oficina de Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenga un cartucho Xpert y un vial de reactivo para muestras para cada muestra.



2 Inserte el hisopo en el vial del reactivo de la muestra.

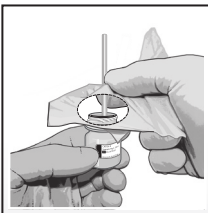

3 Rompa el hisopo por la marca ranurada cerca de la abertura del frasco.

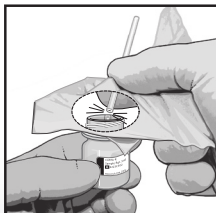


4 Vuelva a taponar el vial del reactivo de la muestra y agítelo en una agitadora vorticial durante 10 segundos.



5 Abra la tapa del cartucho Xpert.



6 aspire el reactivo de la muestra hasta la línea en la pipeta suministrada.

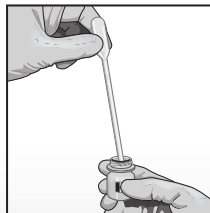

7 Vacíe la pipeta en la cámara de la muestra.



8 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



9 Inicie la prueba dentro del período especificado en el prospecto.

Nota: No sujete el hisopo por debajo de la marca ranurada. Utilice un paño o un artículo equivalente para minimizar el riesgo de contaminación.