

Préparation de la cartouche Xpert[®] HCV VL

- Xpert[®] HCV Viral Load

Consultez la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique santé/sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid

Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Avant de démarrer ce test :

1. Centrifuger l'échantillon afin de séparer le plasma/sérum et les globules rouges conformément aux instructions du fabricant.
2. Laisser le plasma/sérum s'équilibrer à la température ambiante (20-35 °C).
3. Passer au Vortex pendant 15 secondes avant utilisation. Si l'échantillon est trouble, clarifier en vortexant rapidement.




- 1 Prendre une cartouche Xpert pour chaque échantillon.



- 2 Ouvrir le couvercle de la cartouche.



- 3 Aspirer le plasma/sérum à un niveau juste en dessus du repère de 1 mL sur la pipette.

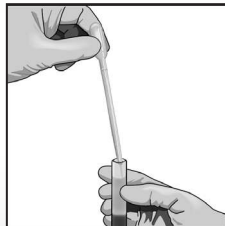

- 4 Vider le contenu dans la chambre d'échantillon.



- 5 Fermer le couvercle de la cartouche.



- 6 Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.