

# Xpert® HIV-1 VL XC Przygotowanie kartridża *przy użyciu pipety dostarczonej przez firmę Cepheid*

- Xpert® HIV-1 VL XC

**Szczegółowe informacje,  
środki ostrożności i  
ostrzeżenia zamieszczono  
w ulotce informacyjnej.**

Kopia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS, Safety Data Sheet) jest dostępna na stronie [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) lub [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Centrum wsparcia klienta firmy Cepheid

Biuro w Stanach Zjednoczonych  
(888) 838-3222, Opcja 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Biuro w Europie  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**UWAGA:** Przed przeniesieniem przy pomocy pipety osocza do kartridża należy poczekać, aż kartridże testu HIV-1 VL XC i próbki osiągną temperaturę 15-30°C. Nie przenosić przy pomocy pipety osocza do zimnego kartridża (poniżej 15°C).


**1** Wziąć jeden kartridż Xpert i probówkę z osoczem.



**2** Otworzyć pokrywę kartridża.

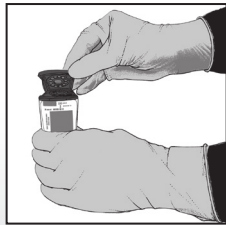


**3** Napelnić pipetę do poziomu tuż pod bańką ssącą, aby przenieść co najmniej 1 ml osocza z próbki. Upewnić się, że podczas napełniania pipety w końcówce pipety nie powstały żadne duże pęcherzyki powietrza.

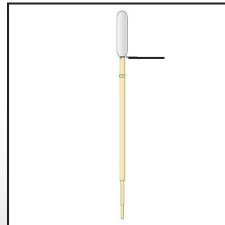

**4** Przenieść zawartość pipety do komory na próbkę kartridża.



**5** Zamknąć pokrywę kartridża.

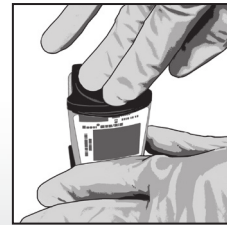

**6** Rozpocząć test w czasie określonym w ulotce informacyjnej.

# Xpert<sup>®</sup> HIV-1 VL XC Przygotowanie kartridża *przy użyciu pipety precyzyjnej*

**Szczegółowe informacje, środki ostrożności i ostrzeżenia zamieszczone w ulotce informacyjnej.**

Kopia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS, Safety Data Sheet) jest dostępna na stronie [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) lub [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Centrum wsparcia klienta firmy Cepheid  
Biuro w Stanach Zjednoczonych (888) 838-3222, Opcja 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Biuro w Europie  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**UWAGA:** Przed przeniesieniem przy pomocy pipety osocza do kartridża należy poczekać, aż kartridże testu HIV-1 VL XC i próbki osiągną temperaturę 15-30°C.

Nie przenosić przy pomocy pipety osocza do zimnego kartridża (poniżej 15°C).


**1** Wziąć jeden kartridż Xpert i próbówkę z osoczem.



**2** Otworzyć pokrywę kartridża.

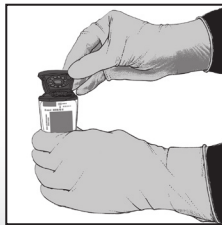

**3** Należy jeden raz wstępnie zwilżyć końcówkę pipety, napelniając końcówkę pipety osoczem i opróżniając ją do próbówki. Następnie pobrać pipetą 1 ml osocza z próbówki.

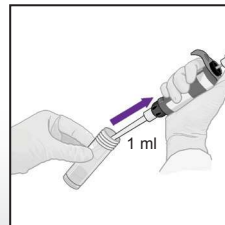

**4** Przenieść zawartość pipety do komory na próbkę kartridża.



**5** Zamknąć pokrywę kartridża.



**6** Rozpocząć test w czasie określonym w ulotce informacyjnej.