

Preparación del cartucho Xpert EV

Consulte el prospecto para las instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para una copia de la SDS, visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid

Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com


Oficina en Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Obtenga un cartucho, tres ampollas y un vial para cada muestra.




- 2 Abra la tapa del cartucho.

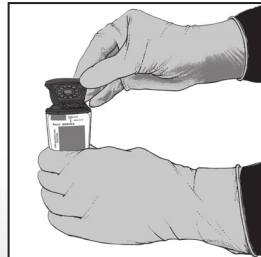

- 3 Abra, y luego añada, la ampolla 1 en 1, la ampolla 2 en 2 y la ampolla 3 en 3.

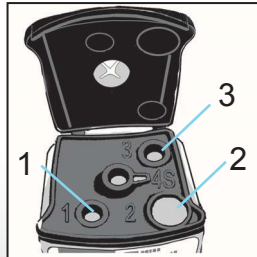

- 4 Pipetee 140 µl de reactivo de lisis en la cámara 4S, y luego pipetee 140 µl de la muestra en la cámara 4S.

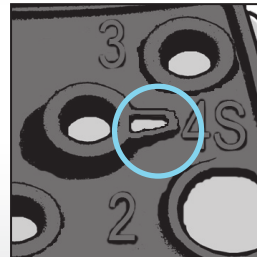

- 5 Cierre la tapa del cartucho.



- 6 Inicie la prueba dentro de los límites de tiempo especificados en el prospecto.