

# Preparazione della cartuccia Xpert® Xpress Strep A

- Xpert Xpress Strep A

**Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.**

Per una copia della scheda dati di sicurezza (SDS), visitare il sito [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistenza Tecnica di Cepheid  
Ufficio USA  
+1 (888) 838-3222, opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Ufficio europeo  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**1** Prendere una cartuccia e una pipetta di trasferimento da 300 µL (fornita in dotazione).




**2** Agitare vigorosamente la provetta di trasporto per 5 secondi.




**3** Aprire il coperchio della cartuccia.

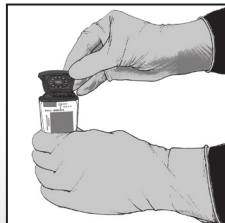

**4** Svitare il tappo (ma non rimuoverlo).

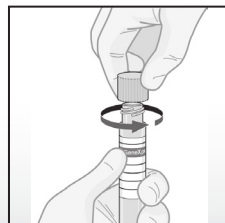

**5** Sollevare il tappo con il tampone ad esso fissato (se pertinente). Aspirare 300 µL di campione (una aspirazione).

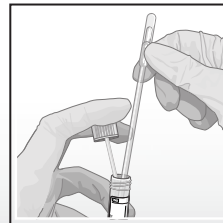

**6** Svotare la pipetta nella camera del campione della cartuccia.



**7** Chiudere il coperchio della cartuccia.

