

Preparazione della cartuccia Xpert® Xpress Flu/RSV

- Xpert® Xpress Flu/RSV

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com
Ufficio europeo
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




- 1 Usare una singola cartuccia Xpert per ogni campione.



- 2 Capovolgere 5 volte la provetta.



- 3 Aprire il coperchio della cartuccia.

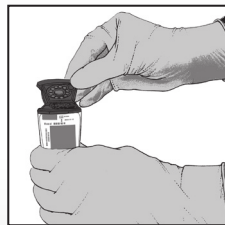

- 4 Utilizzando una pipetta pulita da 300 µL (fornita), trasferire 300 µL (un'aspirazione) di campione nell'apertura della cartuccia.



- 5 Chiudere il coperchio della cartuccia.



- 6 Dare inizio al test entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.