

# Vorbereitung der Xpert® Bladder Cancer Kartusche

Abbildungen zeigen Urinprobe

**Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**


Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Technischer Kundendienst von Cepheid  
Büro USA  
(888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Europäische Niederlassung  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Eine korrekt entnommene und gekennzeichnete Urinprobe beschaffen.

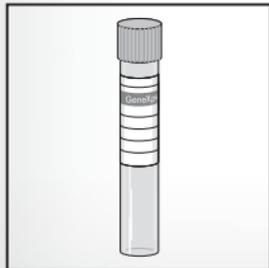


2 Eine Xpert Bladder Cancer Kartusche und Transferpipette (mitgeliefert) beschaffen.




3 Den Xpert Kartuschendeckel öffnen.



4 Das Transportröhrchen zum Mischen 3 Mal vorsichtig umdrehen.

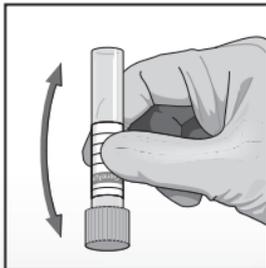

5 Die Transferpipette bis zur 4-ml-Linie mit der Probe füllen.

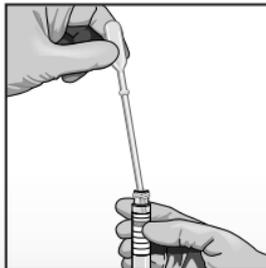


6 Die Transferpipette in die Probenkammer entleeren.



7 Den Deckel der Xpert-Kartusche schließen.



8 Die Kartusche einsetzen und den Assay starten.

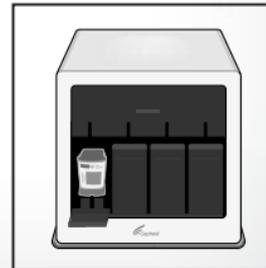

# Vorbereitung der Xpert® Bladder Cancer Kartusche

Abbildungen zeigen Urinprobe im primären Sammelgefäß

**Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Technischer Kundendienst von Cepheid  
Büro USA (888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Europäische Niederlassung  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



- 1 Eine mindestens 4,5 ml große Urinprobe im primären Sammelgefäß beschaffen.
- 2 Ein GeneXpert Urin-Transportreagenz-Kit beschaffen.
- 3 Das Sammelgefäß zum Mischen des Urins 3 Mal umdrehen.
- 4 Die Einweg-Transferpipette verwenden, die im Xpert Urin-Transportreagenz-Kit enthalten ist (im Beutel mit dem Röhrchen). HINWEIS: Nicht die Pipette aus dem Assaykit verwenden.
- 5 Die Transferpipette bis zum Boden des Uringefäßes einführen.
- 6 Ungefähr 4,5 ml Urin transferieren, sodass das Volumen die schwarze Linie auf dem Etikett des Röhrchens erreicht.
- 7 Den Deckel des Xpert Urin-Transportröhrchens wieder aufsetzen und fest zuschrauben. Korrekt beschriften und zum Bereich, in dem die GeneXpert Assaykartusche vorbereitet wird, bringen.
- 8 Bitte die weiteren Anweisungen auf der Rückseite dieser Karte beachten.

