

Préparation de la cartouche Xpert® Xpress Strep A

- Xpert Xpress Strep A

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com


Bureau en Europe
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




- 1 Prendre une cartouche et une pipette de transfert de 300 µl (fournie).




- 2 Agiter vigoureusement le tube de transport pendant 5 secondes.

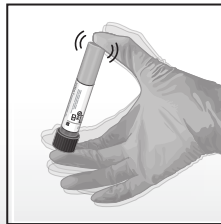


- 3 Ouvrir le couvercle de la cartouche.

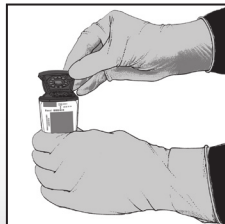


- 4 Dévisser le bouchon (ne pas retirer le bouchon).

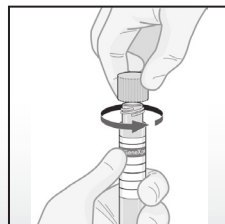

- 5 Soulever le capuchon avec l'écouvillon fixé, le cas échéant. Aspirer 300 µl de l'échantillon (une aspiration).

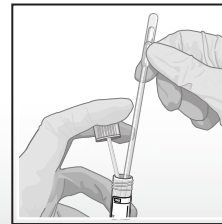

- 6 Vider la pipette dans la chambre à échantillon de la cartouche.

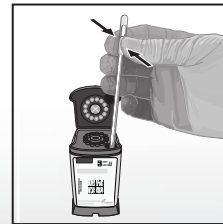

- 7 Fermer le couvercle de la cartouche.

