

Preparazione della cartuccia Xpert EV

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com oppure
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid

Ufficio USA
+1 (888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com


Ufficio Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Per ogni campione procurarsi una cartuccia, tre fiale e un flaconcino.




2 Aprire il coperchio della cartuccia.

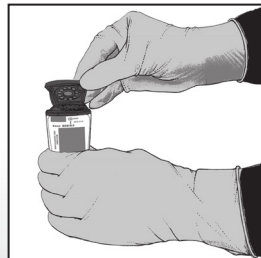

3 Aprire le tre fiale e aggiungere il contenuto della fiala 1 nell'apertura 1, il contenuto della fiala 2 nell'apertura 2 e il contenuto della fiala 3 nell'apertura 3.

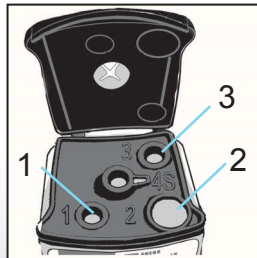

4 Pipettare nella camera 4S 140 µl di reagente di lisi e poi 140 µl di campione.

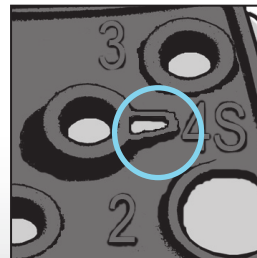

5 Chiudere il coperchio della cartuccia.



6 Iniziare il test entro l'intervallo di tempo specificato nel foglietto illustrativo.