

Xpert® Preparación del cartucho de HPV

Consulte el prospecto para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.


Para obtener un ejemplar de la hoja de datos de seguridad, visite www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Oficina en Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Obtenga una muestra cervical adecuadamente recogida y etiquetada.

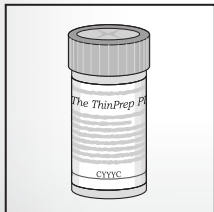

2 Obtenga un cartucho Xpert HPV y una pipeta de transferencia (suministrada).



3 Abra la tapa del cartucho Xpert.



4 Invierta suavemente el frasco de la muestra 8-10 veces o agítelo brevemente en un mezclador vórtex a media velocidad durante unos 5 segundos.



5 Llene la pipeta de transferencia con muestra hasta la línea (1 ml).



6 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de muestras.



7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



8 Introduzca el cartucho e inicie el ensayo.

