

Preparación del cartucho Xpert® Xpress Strep A

- Xpert Xpress Strep A

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




- 1 Tome un cartucho y una pipeta de transferencia de 300 µl (suministrada).




- 2 Agite enérgicamente el tubo de transporte durante 5 segundos.




- 3 Abra la tapa del cartucho.

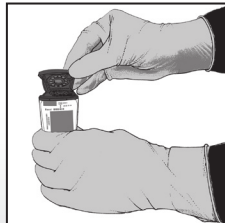


- 4 Desenrosque el tapón (pero no lo quite).

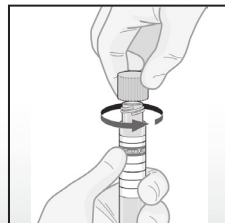

- 5 Levante el tapón con el hisopo fijado, si corresponde. aspire 300 µl de muestra (una extracción).

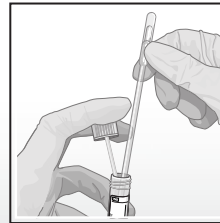

- 6 Vacíe la pipeta en la cámara de muestras del cartucho.

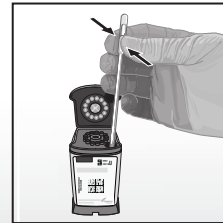

- 7 Cierre la tapa del cartucho.

