

Préparation de la cartouche Xpert® Xpress Flu/RSV

- Xpert® Xpress Flu/RSV

Se reporter à la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid

Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




- 1 Prendre une cartouche Xpert pour chaque échantillon.



- 2 Retourner 5 fois le tube.




- 3 Ouvrir le couvercle de la cartouche.

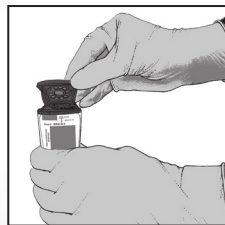

- 4 À l'aide d'une pipette propre de 300 µl (fournie), transférer 300 µl (une aspiration) de l'échantillon dans l'ouverture de la cartouche.



- 5 Fermer le couvercle de la cartouche.

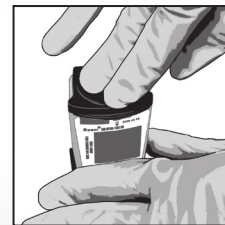

- 6 Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.