

# Vorbereitung der Xpert® HIV-1 VL XC Kartusche mit einer von Cepheid bereitgestellten Pipette



- Xpert® HIV-1 VL XC

**Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des SDS (Sicherheitsdatenblatts) ist auf [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com) abrufbar.


Technischer Kundendienst von Cepheid  
US-Niederlassung  
(888) 838-3222, Option 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Europäische Niederlassung  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

**HINWEIS:** Vor dem Pipettieren von Plasma in die Kartusche HIV-1 VL XC Testkartuschen und Probe auf eine Temperatur von 15–30 °C kommen lassen. Kein Plasma in eine Kartusche pipettieren, die kalt ist (unter 15 °C).


- 1 Eine Xpert Kartusche und ein Röhrchen Plasma verwenden.



- 2 Den Kartuschendeckel öffnen.

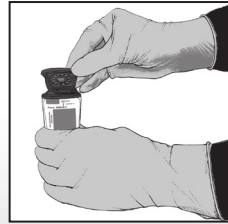


- 3 Die Pipette bis knapp unterhalb des Ballons füllen, um mindestens 1 ml Plasma aus dem Röhrchen zu transferieren. Sicherstellen, dass sich an der Pipettenspitze während des Füllens keine großen Luftblasen bilden.

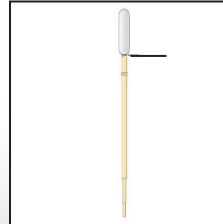

- 4 Den Inhalt der Pipette in die Probenkammer der Kartusche füllen.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.

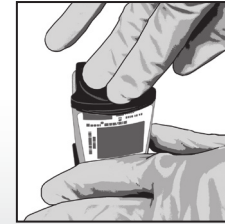

- 6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.

# Vorbereitung der Xpert<sup>®</sup> HIV-1 VL XC Kartusche mit einer Präzisionspipette

**Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des SDS (Sicherheitsdatenblatts) ist auf [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com) abrufbar.

Technischer Kundendienst von Cepheid  
US-Niederlassung  
(888) 838-3222, Option 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Europäische Niederlassung  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**HINWEIS:** Vor dem Pipettieren von Plasma in die Kartusche HIV-1 VL XC Testkartuschen und Probe auf eine Temperatur von 15–30 °C kommen lassen. Kein Plasma in eine Kartusche pipettieren, die kalt ist (unter 15 °C).


- 1** Eine Xpert Kartusche und ein Röhrchen Plasma verwenden.



- 2** Den Kartuschendeckel öffnen.

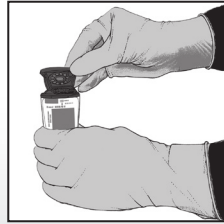

- 3** Die Pipettenspitze vorher einmal befeuchten, indem die Pipettenspitze mit Plasma gefüllt und dann wieder ins Röhrchen geleert wird. Anschließend die Pipette mit 1 ml Plasma aus dem Röhrchen füllen.

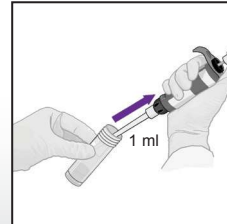

- 4** Den Inhalt der Pipette in die Probenkammer der Kartusche füllen.



- 5** Den Kartuschendeckel schließen.



- 6** Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.