

# Vorbereitung der Xpert® Xpress Strep A-Kartusche

- Xpert Xpress Strep A

**Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des Sicherheits-datenblatts ist auf [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com) abrufbar.


Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA  
(888) 838-3222, Option 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Europäische Niederlassung  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




- 1 Eine Kartusche und eine 300- $\mu$ l-Transferpipette (mitgeliefert) zur Hand nehmen.

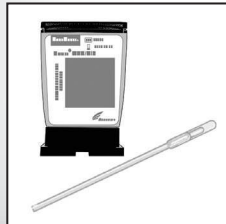


- 2 Das Transportröhrchen 5 Sekunden lang kräftig schütteln.

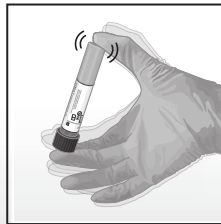


- 3 Den Kartuschendeckel öffnen.

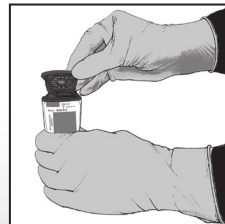


- 4 Den Deckel aufschrauben (nicht abnehmen).

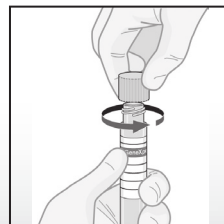

- 5 Den Deckel mit dem angebrachten Tupfer (sofern zutreffend) abheben. 300  $\mu$ l der Probe (eine Pipettenfüllung) aspirieren.

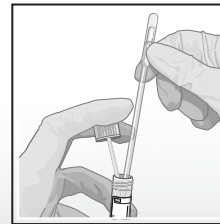

- 6 Die Pipette in die Probenkammer der Kartusche entleeren.

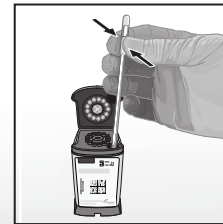

- 7 Den Kartuschendeckel schließen.

