

Preparación del cartucho Xpert[®] *con la muestra de orina o hisopo en el tubo de reactivo de transporte.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV

Consulte el prospecto para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.


Para obtener un ejemplar de la hoja de datos de seguridad, visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina en Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenga un tubo de reactivo de transporte recogido y etiquetado correctamente.

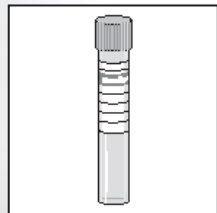


2 Obtenga un cartucho Xpert y una pipeta de transferencia (suministrada en el kit del ensayo).




3 Abra la tapa del cartucho Xpert.

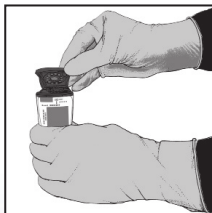

4 Invierta suavemente el tubo de transporte de 3 a 4 veces para mezclar su contenido.

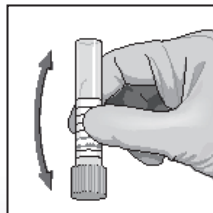

5 Llene la pipeta de transferencia por encima de la marca que hay en el cuerpo de la pipeta.

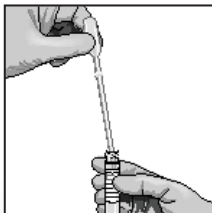

6 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de la muestra.



7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



8 Introduzca el cartucho e inicie la prueba.



Preparación del cartucho Xpert[®] *con la muestra de orina en el recipiente de muestras primario.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV

Consulte el prospecto para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.


Para obtener un ejemplar de la hoja de datos de seguridad, visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com


Oficina en Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenga una muestra de primera orina en el recipiente de recogida primario. Asegúrese de que la orina esté bien mezclada en el recipiente de orina antes de transferir una alícuota al tubo de reactivo de transporte de orina Xpert.

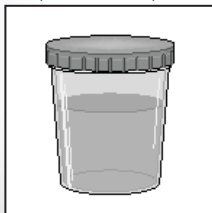

2 Obtenga un kit de recogida de muestras de orina Xpert.

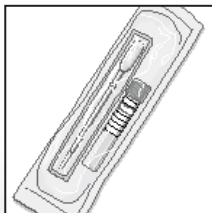

3 Abra el envase de una pipeta de transferencia desechable suministrada en el kit de recogida de muestras de orina Xpert.
NOTA: NO utilice la pipeta del kit del ensayo.

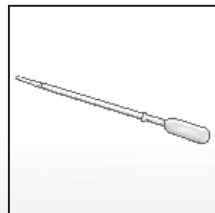


4 Introduzca la pipeta de transferencia en la parte inferior del recipiente de orina.



5 Transfiera aproximadamente 7 ml de orina de forma que el volumen llegue a la línea negra discontinua que hay en la etiqueta del tubo.



6 Vuelva a colocar la tapa en el tubo de reactivo de transporte de orina y ajústela bien. Etiquete adecuadamente el tubo y llévelo a la zona de preparación de cartuchos del ensayo GeneXpert.

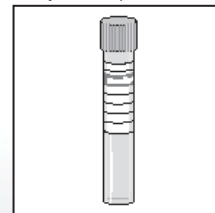

7 Para obtener más instrucciones, consulte el dorso de esta tarjeta.