

Preparação do cartucho Xpert® Bladder Cancer mostrando uma amostra de urina


Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
+1 (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com
Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Obtenha uma amostra de urina devidamente colhida e rotulada.

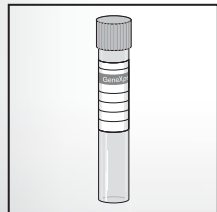


2 Obtenha um cartucho Xpert Bladder Cancer e uma pipeta de transferência (fornecida).




3 Abra a tampa do cartucho Xpert.



4 Inverta suavemente o tubo para transporte 3 vezes para misturar.

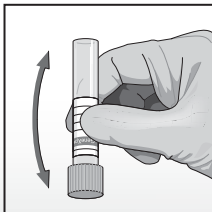

5 Encha a pipeta de transferência com amostra até à marca de 4 ml.

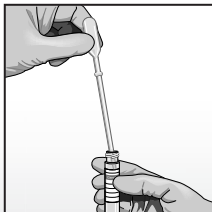


6 Esvazie o conteúdo da pipeta na câmara da amostra.



7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



8 Introduza o cartucho e inicie o ensaio.

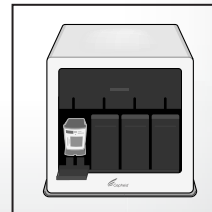

Preparação do cartucho Xpert® Bladder Cancer

mostrando uma amostra de urina no recipiente principal de amostras

Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
+1 (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com
Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



- 1 Obtenha uma amostra de urina de pelo menos 4,5 ml no recipiente de colheita principal.
- 2 Obtenha um kit de reagente para transporte de urina Xpert.
- 3 Inverta o recipiente de colheita 3 vezes para misturar a urina.
- 4 Utilize a pipeta de transferência descartável fornecida no kit de reagente de transporte de urina Xpert na bolsa com o tubo. NOTA: Não utilize a pipeta do kit do ensaio.
- 5 Introduza a pipeta de transferência no fundo do recipiente de urina.
- 6 Transfira aproximadamente 4,5 ml de urina de maneira a que o volume atinja a linha preta no rótulo do tubo.
- 7 Volte a colocar a tampa no tubo de reagente para transporte de urina Xpert e aperte bem. Rotule-o devidamente e transfira-o para a área de preparação do cartucho GeneXpert.
- 8 Consulte o verso deste cartão para obter mais instruções.

