


# Recogida de muestras rectales/perirrectales


1

Utilice el dispositivo de recogida de Cepheid n.º 900-0370 para recoger la muestra.

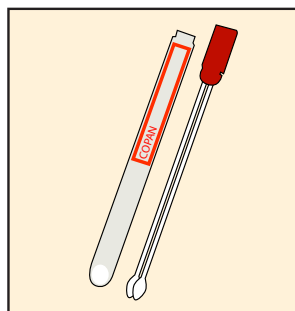

3

Vuelva a introducir el par de hisopos en el tubo de transporte.

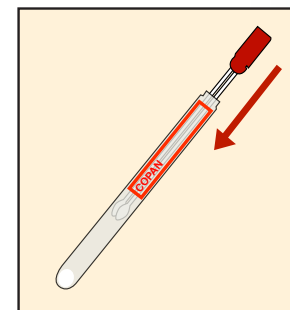


2

O bien,


## Muestra de hisopos rectales

Inserte con cuidado las puntas de ambos hisopos aproximadamente 1 cm más allá del esfínter anal y gírelas suavemente.

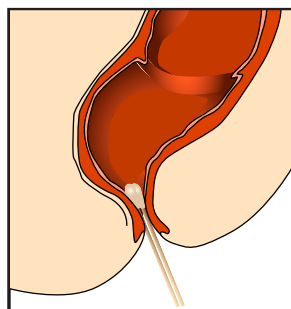

## Muestra de hisopos perirrectales

Inserte con cuidado las puntas de ambos hisopos no más de 1 cm en la abertura anal antes del esfínter anal y gírelas suavemente.

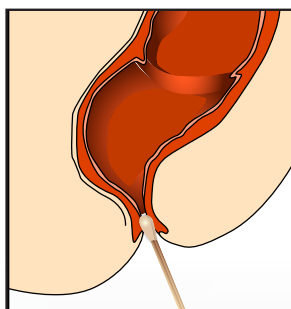

4

Los hisopos en el tubo de transporte se pueden almacenar a 15-28 °C durante un máximo de cinco días.

