

Preparación de los cartuchos del Xpert[®] MRSA NxG Uso del hisopo doble

Dispositivo de recogida de muestras Cepheid (hisopo doble en medios Stuart líquidos, n.º de ref. 900-0370)

o sistemas de hisopo doble y transporte de Copan (n.º de ref. 139C LQ STUART)

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.



Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite www.cephheid.com o www.cephheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina de EE. UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cephheid.com

Oficina de Europa
+33 563 82 53 19
support@cephheid.com



- 1 Obtenga un cartucho Xpert y un frasco de reactivo de elución para cada muestra.
- 2 Inserte un hisopo individual en el frasco del reactivo de elución.
- 3 Rompa el hisopo por la marca ranurada cerca de la abertura del frasco.
- 4 Vuelva a taponar el frasco de reactivo de elución y agítelo en un mezclador vórtex a alta velocidad durante 10 segundos.
- 5 Abra la tapa del cartucho Xpert.
- 6 Con una pipeta de transferencia (no suministrada), transfiera todo el contenido del frasco a la cámara de muestras del cartucho.
- 7 Vacíe la pipeta en la cámara de muestras.
- 8 Cierre la tapa del cartucho Xpert.
- 9 Comience la prueba dentro del período especificado en el prospecto.

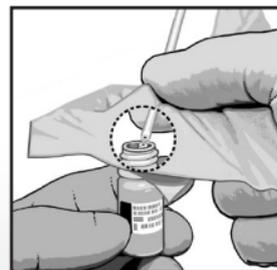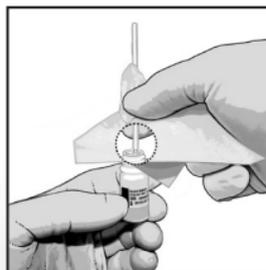

Nota: No sujete el hisopo por debajo de la marca ranurada. Utilice un paño o un artículo equivalente para minimizar el riesgo de contaminación.

Preparación de los cartuchos del Xpert[®] MRSA NxG Uso de un ESwab

Sistema de recogida y transporte ESwab en medios Amies líquidos (Copan 480CE o kit de recogida BD ESwab, n.º de ref. 220245)

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina de EE. UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenga un cartucho Xpert y un frasco de reactivo de elución para cada muestra.



2 Agite la muestra del hisopo en un agitador vórtex a alta velocidad durante 5 segundos.



3 Utilizando una pipeta de transferencia (no suministrada), transfiera 300 µl de la muestra líquida al frasco de reactivo de elución.

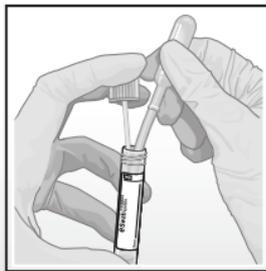

4 Vuelva a tapar el frasco de reactivo de elución y agítelo en un mezclador vórtex a alta velocidad durante 10 segundos.



5 Abra la tapa del cartucho Xpert.



6 Con una pipeta de transferencia (no suministrada), transfiera todo el contenido del frasco a la cámara de muestras del cartucho.



7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



8 Comience la prueba dentro del período especificado en el prospecto.

