

Preparazione della cartuccia Xpert® Factor II & Factor V

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda dati di sicurezza (SDS), visitare il sito www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



- 1 Procurarsi la provetta di prelievo del campione con EDTA o citrato di sodio.



- 2 Procurarsi una cartuccia Xpert Factor II & Factor V.




- 3 Miscelare delicatamente il campione, capovolgendo la provetta per almeno 5 volte fino ad ottenere un contenuto omogeneo.



- 4 Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.



- 5 Utilizzando una pipetta volumetrica con puntale resistente agli aerosol, aspirare 50 µL di campione.

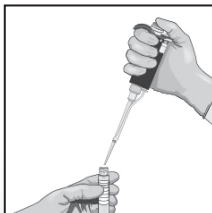

- 6 Trasferire il campione sulla parete inferiore della camera "S" della cartuccia.



- 7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



- 8 Caricare la cartuccia e avviare il saggio.