

Präparation der Xpert® Ebola Kartusche mit Darstellung eines Wangenabstrichs

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.


Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblattes ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar.

Technischer Kundendienst von Cepheid


Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com

Die Spitze des Tupfers* mit festen, kreisförmigen Bewegungen an der Wangeninnenseite reiben. Wenn möglich, beide Wangen und den gesamten Tupferkopf verwenden.

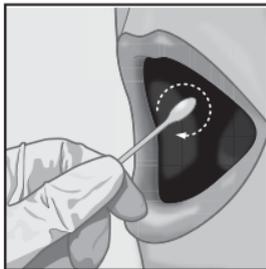

Die kleine Rille am Tupfer an den Rand der Flasche mit Probenreagenz anlegen und den Tupfer durch Biegen auf eine Seite abbrechen. Zur Verhinderung von Spritzern Mull verwenden.

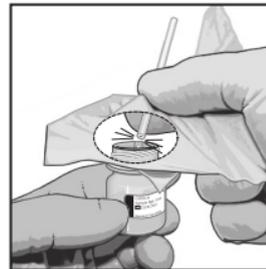


Cepheid®
A better way.

- 1 Eine Xpert Ebola-Kartusche und eine korrekt entnommene und gekennzeichnete Probe beschaffen.



- 2 Bei geschlossenem Deckel der Flasche mit Probenreagenz die Probe auf dem Vortex 10 Sekunden mischen.



- 3 Die Probe 20 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren.



- 4 Die Kartusche öffnen.



- 5 Mit der enthaltenen Pipette 1 ml der mit Probenreagenz behandelten Probe aspirieren.



- 6 Den Inhalt der Pipette in die Probenkammer entleeren.



- 7 Den Xpert Kartuschendeckel schließen.



- 8 Den Test innerhalb von 30 Minuten beginnen.

Präparation der Xpert® Ebola Kartusche mit Darstellung einer durch Stich in die Fingerbeere erhaltenen Probe mit Darstellung einer durch Stich in die Fingerbeere erhaltenen Probe


Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblattes ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar.


Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com


Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com

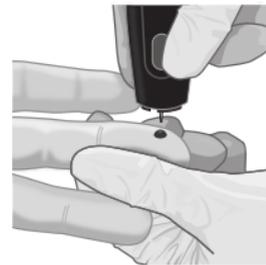

Mindestens 2/3 des Tupfer*-Kopfes Blut aufsaugen lassen. Den Tupfer unverzüglich in die Flasche mit Probenreagenz stecken.

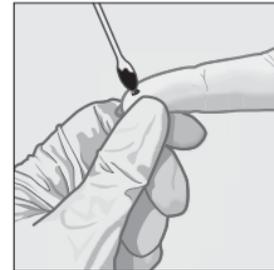

Die kleine Rille am Tupfer an den Rand der Flasche mit Probenreagenz anlegen und den Tupfer durch Biegen auf eine Seite abbrechen. Zur Verhinderung von Spritzern Mull verwenden.

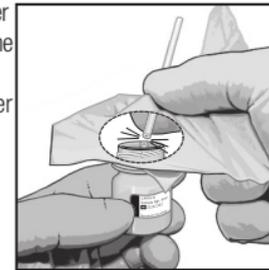

- 1 Eine Xpert Ebola-Kartusche und eine korrekt entnommene und gekennzeichnete Probe beschaffen.
- 2 Bei geschlossenem Deckel der Flasche mit Probenreagenz die Probe auf dem Vortex 10 Sekunden mischen.
- 3 Die Probe 20 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren.
- 4 Die Kartusche öffnen.
- 5 Mit der enthaltenen Pipette 1 ml der mit Probenreagenz behandelten Probe aspirieren.
- 6 Den Inhalt der Pipette in die Probenkammer entleeren.
- 7 Den Xpert Kartuschendeckel schließen.
- 8 Den Test innerhalb von 30 Minuten beginnen.

