

Préparation de la cartouche Xpert® Ebola pour échantillon sur écouvillon buccal


Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique santé/sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com


Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com

Frotter l'extrémité de l'écouvillon* contre l'intérieur de la joue en effectuant des mouvements circulaires fermes. Frotter les deux joues, si possible, et utiliser l'ensemble de la tête de l'écouvillon.

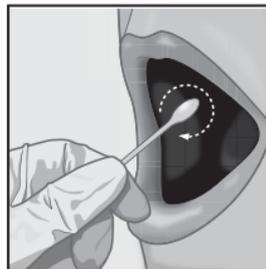

Aligner la petite rainure sur l'écouvillon sur le bord du flacon de réactif échantillon et casser l'écouvillon en le pliant vers un côté. Utiliser de la gaze pour éviter toute éclaboussure.

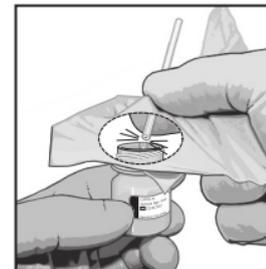

**Cepheid**
A better way.

1 Se procurer une cartouche Xpert Ebola et un échantillon prélevé et étiqueté de manière appropriée.



2 Avec le couvercle du flacon de réactif échantillon fermé, mélanger l'échantillon au vortex pendant 10 secondes.



3 Incuber l'échantillon à température ambiante pendant 20 minutes.



4 Ouvrir la cartouche.



5 À l'aide de la pipette fournie, aspirer 1 mL d'échantillon traité avec le réactif échantillon.



6 Vider le contenu de la pipette dans la chambre échantillon.



7 Fermer le couvercle de la cartouche Xpert.



8 Commencer le test dans un délai de 30 minutes.

Préparation de la cartouche Xpert® Ebola pour échantillon prélevé au bout du doigt

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique santé/sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com


Service d'assistance technique de Cepheid

Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com


Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



Laisser la tête de l'écouvillon* absorber le sang jusqu'à ce qu'il soit imbibé au 2/3 au moins. Placer immédiatement l'écouvillon dans le flacon de réactif échantillon.

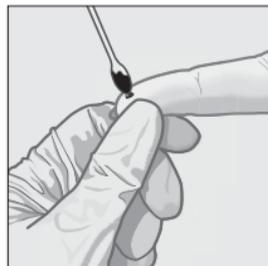

Aligner la petite rainure sur l'écouvillon sur le bord du flacon de réactif échantillon et casser l'écouvillon en le pliant vers un côté. Utiliser de la gaze pour éviter toute éclaboussure.

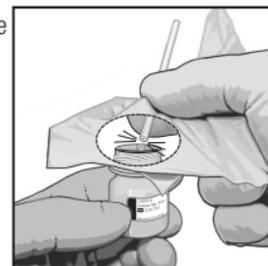

**Cepheid**®
A better way.

- 1 Se procurer une cartouche Xpert Ebola et un échantillon prélevé et étiqueté de manière appropriée.
- 2 Avec le couvercle du flacon de réactif échantillon fermé, mélanger l'échantillon au vortex pendant 10 secondes.
- 3 Incuber l'échantillon à température ambiante pendant 20 minutes.
- 4 Ouvrir la cartouche.
- 5 À l'aide de la pipette fournie, aspirer 1 mL d'échantillon traité avec le réactif échantillon.
- 6 Vider le contenu de la pipette dans la chambre échantillon.
- 7 Fermer le couvercle de la cartouche Xpert.
- 8 Commencer le test dans un délai de 30 minutes.

