

# Préparation de la cartouche Xpert® HBV VL

- Xpert® HBV Viral Load

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Service d'assistance technique de Cepheid  
Bureau aux États-Unis  
+1 (888) 838-3222, Option 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Bureau en Europe  
+33.563.825.319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

## Avant de commencer ce test :


1. Centrifuger l'échantillon pour séparer le plasma/sérum et les globules rouges selon les instructions du fabricant.
2. Équilibrer le plasma/sérum à température ambiante (20 °C à 35 °C).
3. Passer au vortex pendant 10 secondes avant utilisation. Si l'échantillon est trouble, le centrifuger rapidement pour le clarifier.




- 1 Prendre une cartouche Xpert pour chaque échantillon.



- 2 Ouvrir le couvercle de la cartouche.

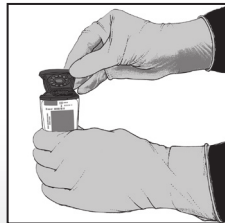

- 3 Aspirer le plasma/sérum jusqu'au niveau juste au-dessus du repère 1 ml sur la pipette de transfert ou aspirer juste 0,6 ml de plasma/sérum à l'aide de la pipette de précision.

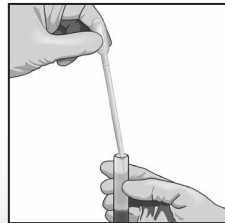

- 4 Vider le contenu dans la chambre à échantillon.



- 5 Fermer le couvercle de la cartouche.



- 6 Démarrer le test dans les 4 heures qui suivent l'ajout de l'échantillon dans la cartouche.