

# Preparazione della cartuccia Xpert® *con illustrazione di un campione di urina o di tampone nella provetta con reagente per trasporto.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV


**Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.**

Per una copia del foglio con i dati di sicurezza, vedere [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistenza Tecnica di Cepheid  
Ufficio USA  
+1 (888) 838-3222, opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Ufficio Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




- 1 Ottenere una provetta con reagente per trasporto prelevato nel modo corretto, debitamente etichettata.

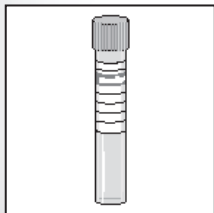


- 2 Procurarsi una cartuccia Xpert e una pipetta di trasferimento (contenuta nel kit del saggio).




- 3 Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.

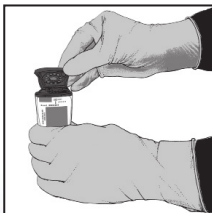

- 4 Capovolgere delicatamente la provetta di trasporto 3-4 volte per miscelare.

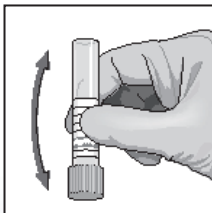

- 5 Riempire la pipetta di trasferimento sopra la tacca sull'asta della pipetta.

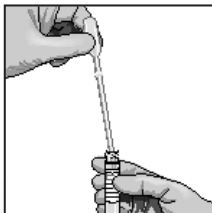

- 6 Svuotare il contenuto della pipetta nella camera del campione.



- 7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



- 8 Introdurre la cartuccia e avviare il test.



# Preparazione della cartuccia Xpert® con illustrazione del campione di urina nel bicchiere primario di raccolta del campione.

- Xpert CT/NG
- Xpert TV

**Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.**

Per una copia del foglio con i dati di sicurezza, vedere [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)


Assistenza Tecnica di Cepheid  
Ufficio USA  
+1 (888) 838-3222, opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Ufficio Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




**1** Ottenere un campione di primo getto nel bicchiere primario di raccolta. Assicurarsi che l'urina sia ben miscelata nell'apposito bicchiere prima di trasferire un'aliquota nella provetta con reagente per trasporto di urina Xpert.



**2** Procurarsi un kit di prelievo di campioni di urina Xpert.

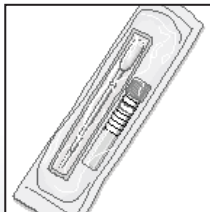

**3** Aprire la confezione di una pipetta di trasferimento monouso fornita nel kit di prelievo di campioni di urina Xpert.  
*NOTA - NON usare la pipetta del kit del saggio.*

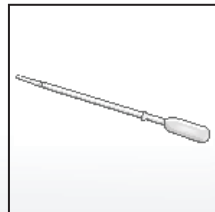


**4** Introdurre la pipetta di trasferimento nel fondo del bicchiere contenente l'urina.



**5** Trasferire circa 7 ml di urina in modo che il volume raggiunga la linea nera tratteggiata sull'etichetta della provetta.



**6** Richiudere con il tappo la provetta con reagente per trasporto di urina e serrarlo saldamente. Etichettarla opportunamente e trasferirla nell'area di preparazione della cartuccia del saggio GeneXpert.

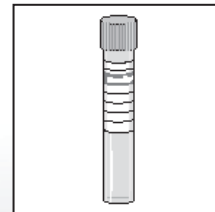

**7** Per ulteriori istruzioni vedere il retro di questa scheda.