

Preparación del cartucho del Xpert® Xpress Flu/RSV

- Xpert® Xpress Flu/RSV

Consulte el prospecto para obtener instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE. UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




- 1 Tome un cartucho Xpert para cada muestra.



- 2 Invierta el tubo 5 veces.




- 3 Abra la tapa del cartucho.

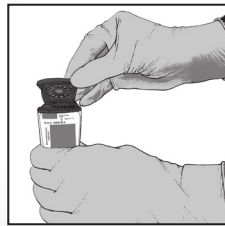

- 4 Con una pipeta limpia de 300 µl (suministrada), transfiera 300 µl (una extracción) de la muestra a la abertura del cartucho.



- 5 Cierre la tapa del cartucho.

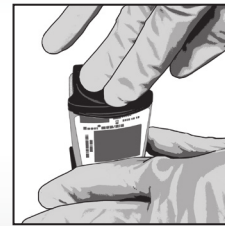

- 6 Comience la prueba dentro del período especificado en el prospecto.