

Preparación del cartucho Xpert[®] HBV VL

- Xpert[®] HBV Viral Load

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones detalladas, precauciones y advertencias.

Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid
Oficina de EE. UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Antes de comenzar esta prueba:


1. Centrifugue la muestra para separar el plasma/suero y los hematíes según las instrucciones del fabricante.
2. Equilibre el plasma/suero a temperatura ambiente (20-35 °C).
3. Agite en un tubo vorticial durante 10 segundos antes del uso. Si la muestra está turbia, aclárela mediante un giro rápido.




- 1 Tome un cartucho Xpert para cada muestra.



- 2 Abra la tapa del cartucho.

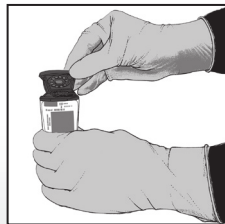


- 3 aspire el plasma/suero hasta justo por encima de la marca de 1 ml de la pipeta de transferencia, o aspire 0,6 ml de plasma/suero con la pipeta de precisión.

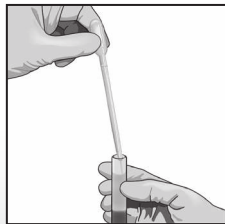

- 4 Vacíe el contenido en la cámara de muestras.



- 5 Cierre la tapa del cartucho.

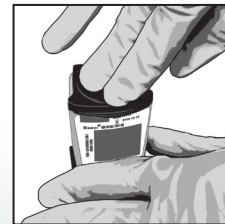

- 6 Comience la prueba en las 4 horas siguientes a añadir la muestra al cartucho.