

Preparação do cartucho Xpert® MTB/RIF Ultra - Expetoração não processada

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Obtenha um cartucho Xpert, reagente de amostra (SR) e um recipiente de colheita de expetoração para cada amostra.




Nota: O volume mínimo de expetoração para um teste é de 1 ml

2 Calcule o volume de expetoração. Adicione 2 volumes de SR a 1 volume de expetoração. Coloque as tampas do recipiente.



3


- Agite* vigorosamente 10 a 20 vezes ou leve ao vórtex durante, pelo menos, 10 segundos.
- Incube à temperatura ambiente durante 10 minutos.
- Agite, de novo, vigorosamente 10 a 20 vezes.
- Incube durante mais 5 minutos. ** Ver Nota a seguir.

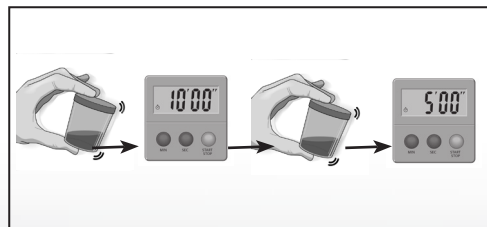


Nota: *Um movimento para trás e para a frente equivale a uma agitação.

Nota: **Agite e incube durante 5 minutos adicionais, se a amostra não estiver totalmente liquefeita.

4 Escreva na parte lateral do cartucho ou coloque um rótulo de identificação. Abra a tampa do cartucho.

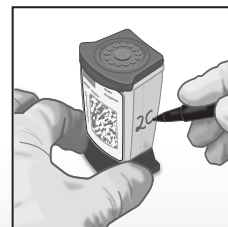

5 aspire a amostra liquefeita até imediatamente acima da linha da pipeta.

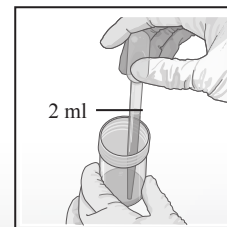

6 Deite a amostra lentamente na câmara da amostra do cartucho.



7 Feche a tampa com firmeza. Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.

