

Preparación del cartucho Xpert® MTB/RIF Ultra - Esputo sin procesar

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Servicio técnico de Cepheid

Oficina en EE.UU.

(888) 838-3222

techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa

+33 563 82 53 19

support@cepheideurope.com




- 1 Obtenga un cartucho Xpert, un reactivo para muestras (SR) y un recipiente de recogida de esputo para cada muestra.




Nota: El volumen de esputo mínimo para una prueba es 1 ml

- 2 Estime el volumen del esputo. Añada 2 volúmenes de SR a 1 volumen de esputo. Vuelva a colocar las tapas del recipiente.

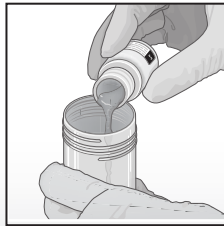


- 3
- Agite* enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un mezclador vórtex durante 10 segundos como mínimo.
 - Incube a temperatura ambiente durante 10 minutos.
 - Agite de forma enérgica de nuevo unas 10 a 20 veces.
 - Incube durante otros 5 minutos.
- ** Consulte la siguiente nota.

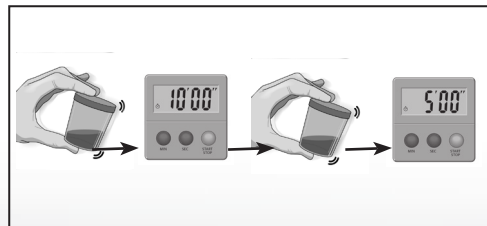


*Nota: *Un movimiento hacia atrás y hacia delante equivale a una sacudida.*

*Nota: **Agite e incube 5 minutos adicionales si la muestra no está completamente licuada.*

- 4 Escriba en el lado del cartucho o pegue una etiqueta de identificación. Abra el cartucho.

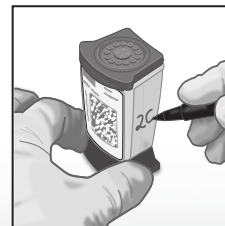

- 5 aspire la muestra licuada hasta justo por encima de la línea de la pipeta.

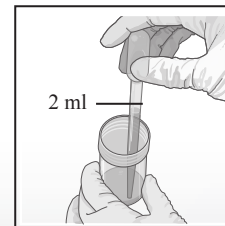

- 6 Vacíe lentamente la muestra en la cámara de muestras del cartucho.



- 7 Cierre firmemente la tapa. Inicie la prueba dentro del período especificado en el prospecto.

