

Preparação do cartucho Xpert® Xpress GBS

Consulte o folheto informativo para obter instruções, precauções e advertências detalhadas.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência técnica da Cepheid
Delegação nos EUA
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheid.com




1 Obtenha um cartucho.



2 Abra a tampa do cartucho.



3 Retire uma zaragatoa da tampa e esfregue suavemente as duas zaragatoas uma na outra com um movimento rotativo durante cinco segundos. Volte a colocar a segunda zaragatoa ainda ligada à tampa no tubo para transporte.

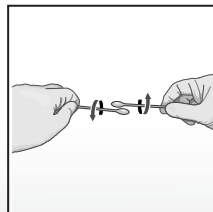

Nota: Não segure na zaragatoa por baixo da zona de quebra.

4 Insira a zaragatoa na câmara de amostra do cartucho. Quebre a zaragatoa pela marca de quebra.



Nota: Utilize gaze ou um equivalente para minimizar o risco de contaminação.

5 Certifique-se de que a zaragatoa consegue flutuar livremente na câmara.



Colocação incorreta da zaragatoa. A extremidade da zaragatoa fica presa na ranhura da abertura da câmara de amostra.



6 Feche a tampa do cartucho. Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.



Procedimento de repetição de teste Xpert

• Xpert® Xpress GBS

Consulte o folheto informativo para obter instruções, precauções e advertências detalhadas.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência técnica da Cepheid
Delegação nos EUA
(888) 838-3222, Opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Elimine o cartucho usado. Obtenha um novo cartucho Xpert® Xpress GBS. Retire a zaragatoa restante do tubo para transporte da colheita.



2 Insira a zaragatoa dentro da câmara de amostra do novo cartucho. Eleve a zaragatoa de modo que a marca de quebra fique centrada na ranhura. Quebre a zaragatoa, dobrando a haste para a direita.



3 Assegure-se que a zaragatoa se encontra corretamente posicionada no cartucho e que a extremidade da zaragatoa não se encontra na ranhura da abertura da câmara de amostra e que não impede o fecho da tampa.



4 Se a zaragatoa estiver presa à ranhura, utilize um pano que não largue pelos/gaze ou a extremidade restante da zaragatoa para libertá-la da ranhura, de modo a minimizar o risco de contaminação.



5 Feche a tampa do cartucho. Inicie o teste dentro do período de tempo indicado no folheto informativo.

