

Vorbereitung der Xpert® Xpress Flu/RSV Kartusche

- Xpert® Xpress Flu/RSV

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com

Technischer Kundendienst von Cepheid
Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com
Europäische Niederlassung
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




- 1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche verwenden.



- 2 Den Behälter 5-mal umdrehen.



- 3 Den Kartuschendeckel öffnen.

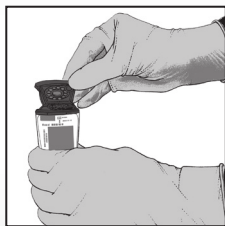

- 4 Mit einer sauberen 300-µl-Pipette (wird mitgeliefert) 300 µl (eine Pipettenfüllung) der Probe in die Öffnung der Kartusche transferieren.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.



- 6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.