

Preparação do cartucho Xpert® Factor II & Factor V

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenha o tubo de EDTA ou citrato de sódio para colheita de amostra.



2 Obtenha um cartucho Xpert Factor II & Factor V.




3 Misture suavemente a amostra invertendo o tubo de amostra 5 vezes até ficar homogênea.

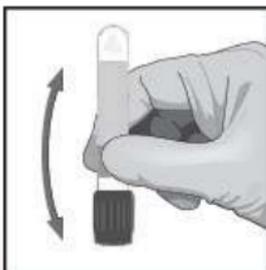

4 Abra a tampa do cartucho Xpert.



5 Utilizando uma pipeta volumétrica com uma ponta resistente a aerossóis, aspire 50 µl da amostra.

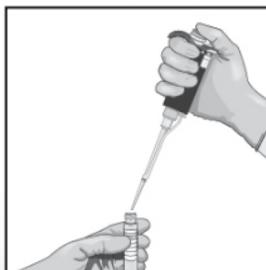

6 Transfira a amostra para a parede inferior da câmara "S" do cartucho.



7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



8 Coloque o cartucho e inicie o ensaio.