

# Preparação do cartucho Xpert® Xpress Flu/RSV

- Xpert® Xpress Flu/RSV

**Consulte o folheto informativo para obter instruções, precauções e advertências.**

Para obter uma cópia da FDS, visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistência Técnica da Cepheid  
Filial nos EUA  
(888) 838-3222, opção 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Delegação na Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




- 1 Utilize um cartucho Xpert para cada amostra.



- 2 Inverta 5 vezes o tubo.



- 3 Abra a tampa do cartucho.

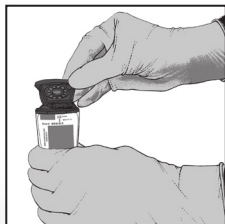

- 4 Utilizando uma pipeta de 300 µl limpa (fornecida), transfira 300 µl (uma colheita) da amostra para a abertura do cartucho.



- 5 Feche a tampa do cartucho.



- 6 Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.