

# Preparação do cartucho Xpert® MRSA/SA Blood Culture

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Poderá obter um exemplar da FDS em [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com).

Assistência técnica da Cepheid  
Delegação nos USA  
(888) 838-3222, Opção 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Delegação na Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Obtenha um cartucho e um frasco de reagente de eluição.




2 Após misturar suavemente a amostra à mão, utilize a pipeta de transferência de 50 µl fornecida para dispensar a amostra no frasco de reagente de eluição. Poderá ficar uma quantidade residual na pipeta.



3 Feche a tampa do reagente de eluição e centrifugue a velocidade alta durante 10 segundos.



4 Abrir a tampa do cartucho.

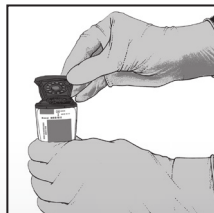

5 Utilizando uma pipeta de transferência limpa (não fornecida), transfira todo o conteúdo do frasco de reagente de eluição para a câmara de eluição do cartucho.



6 Feche a tampa do cartucho.



7 Insira o cartucho e inicie o ensaio no período indicado no folheto informativo.

