

# Preparazione della cartuccia Xpert® Carba-R con un campione di tampone rettale o perirettale

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:  
[www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o  
[www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)





Assistenza Tecnica di Cepheid

Ufficio USA  
+1 888 838 3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Ufficio europeo  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



- 1 Per ciascun campione, procurarsi una cartuccia Xpert e un flaconcino di reagente per il campione.
- 2 Inserire il tampone nel flaconcino di reagente per il campione.
- 3 Spezzare il tampone in corrispondenza della tacca posta vicino all'apertura del flaconcino.
- 4 Richiudere il flaconcino di reagente per il campione e miscelare con il vortex per 10 secondi.
- 5 Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.
- 6 Aspirare il reagente per il campione nella pipetta fornita in dotazione, fino all'apposita linea.
- 7 Svotare la pipetta nella camera del campione.
- 8 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.
- 9 Dare inizio al test entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

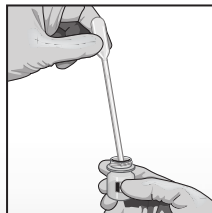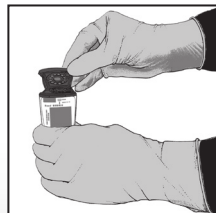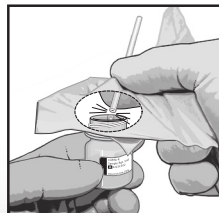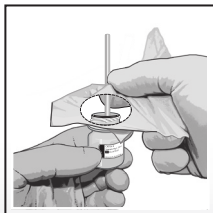

*Nota: non tenere il tampone afferrandolo al di sotto della tacca. Utilizzare una garza o un materiale simile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.*